


DFS VSensor

Обзор программы: окна и их функции

Руководство для врача: все основные окна программы и что они умеют.

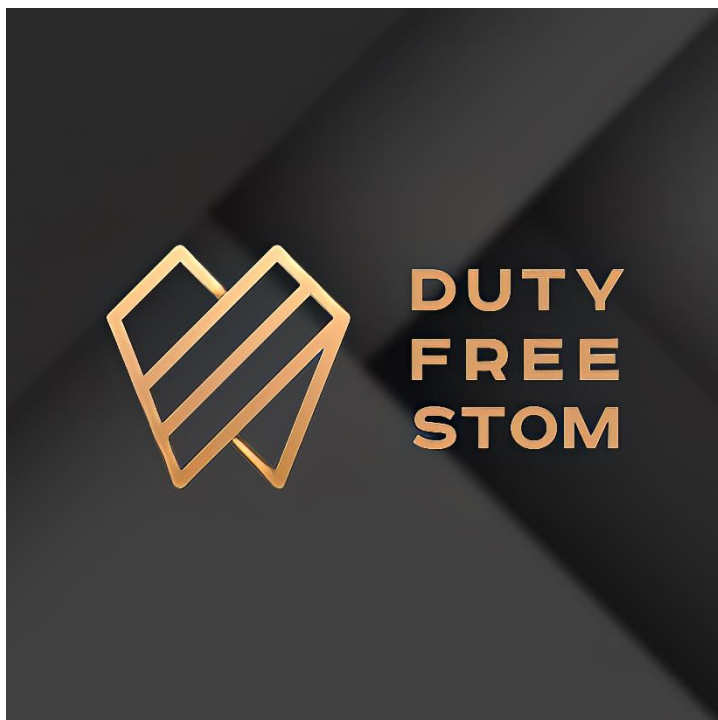

DutyFreeStom · dutyfreestom.ru · +7 905 549 99 55

Содержание

Содержание	2
О документе	3
1. Начало работы	3
1.1. Окно входа	3
1.2. Регистрация врача	4
2. Главное окно	6
2.1. Главное окно	6
3. Пациенты	7
3.1. Карточка пациента	7
3.2. Фильтр по зубам	8
4. Съёмка и сенсор	9
4.1. Выбор типа сенсора	9
4.2. Выбор TWAIN-источника	10
4.3. Редактирование снимка	10
4.4. О режимах съёмки	11
5. Работа со снимками: диагностика и отчёты	12
5.1. Окно диагностики снимка	12
5.2. ИИ-диагностика	12
5.3. Конструктор PDF-отчёта	13
5.4. Выбор снимка из истории	14
5.5. Импорт снимка	15
5.6. Экспорт снимка	16
6. Данные и организация	18
6.1. Об организации	18
6.2. Резервное копирование	18
6.3. Импорт из другого ПО	19
7. Работа по локальной сети	21
7.1. Настройка сети	21
7.2. Информация для подключения	22
7.3. Смена сервера	22
8. Справка, обновления и лицензия	24
8.1. Связаться с производителем	24
8.2. Горячие клавиши	24
8.3. О тарифах лицензии	24
8.4. Лицензия (меню) и активация	24
8.5. Об устройстве / О программе	25
8.6. Проверка обновлений	25

О документе

Этот документ — обзор программы DFS VSensor по окнам. Для каждого окна описано, зачем оно нужно и что в нём можно делать. Окна сгруппированы по задачам — от входа в программу до работы со снимками, отчётов и настроек. Под каждым окном будет расположено фото этого окна для наглядной визуализации.

Тарифы

Часть функций доступна на платных тарифах. Где это важно, рядом с окном стоит плашка тарифа: «Расширенная» или «Максимум». Базовый функционал работает в бесплатном тарифе «Простая».

1. Начало работы

1.1. Окно входа


Назначение: вход в программу под своей учётной записью врача.

Что можно делать:

- Выбрать своего врача из списка (есть поиск и сортировка).
- Ввести пароль, если он задан.
- Нажать «Регистрация», чтобы добавить нового врача (пароль необязателен).

Это окно — точка входа в программу, оно сделано с выбором доктора (где его можно так же создать) для того, чтобы при входе сначала отображались пациенты текущего врача, так как врачей может быть много, и у каждого свои пациенты, и искать в общей куче можно с помощью фильтров, но дольше, чем выбирать из своего списка. При необходимости можно будет выбрать всех пациентов, если надо найти пациента, которого нет в системе и посмотреть его снимки.

Если такая функция излишняя для Вашей клиники, можно вести параллельно пациентов, создавая у отдельного врача дубликаты пациентов с их снимками на этом враче, или вообще создать одного врача, под которым делать снимки и пациентов, не парясь на разделение.

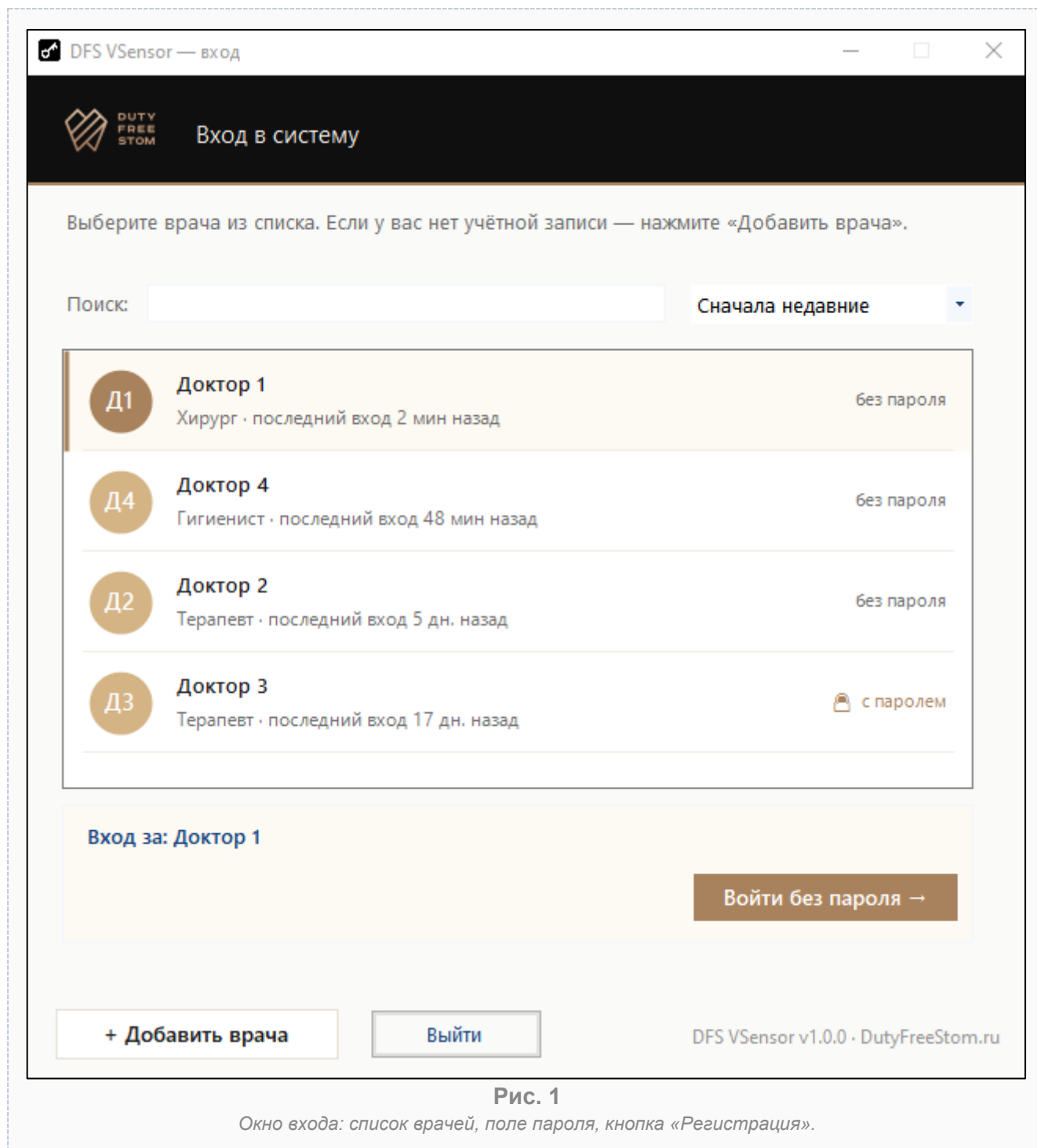


1.2. Регистрация врача

Назначение: создание учётной записи врача.

Что можно делать:

- Указать ФИО и логин.
- Задать пароль (по желанию — можно оставить пустым).
- Первый зарегистрированный врач становится администратором.

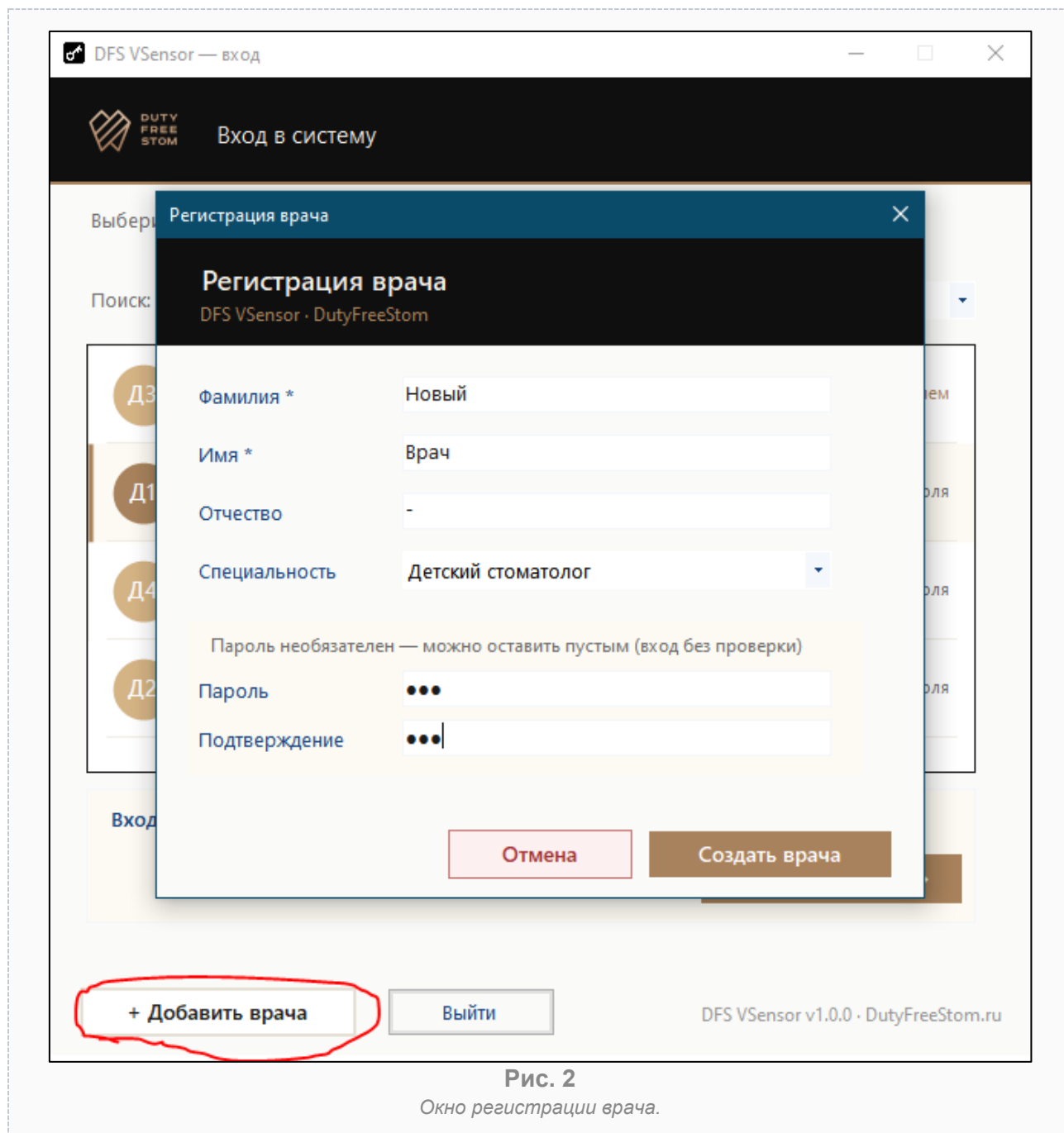

2. Главное окно

2.1. Главное окно

Назначение: рабочий центр программы: пациенты, их снимки и съёмка — всё на одном экране.

Что можно делать:

- Слева — список пациентов: поиск по ФИО, номеру карты и телефону; переключатель «Все» / «Свои»; кнопки добавить и редактировать пациента.
- Фильтры: по зубам, по дате снимка, по дате рождения; кнопка «Очистить» сбрасывает все фильтры и поиск. Фильтры суммируются и применяются динамически (сразу после ввода)
- Справа — список снимков выбранного пациента: дата, зубы, заметка; кнопки редактировать и удалить снимок, а также кнопки Экспорт и Диагностика.
- Режимы съёмки 1 / 2 / 3 / S и режим «Беспрерывно» (серийная съёмка).
- Зубная карта для указания зубов снимка; поддержка нотаций FDI / US / CH.
- Статус сенсора (Подключён / Не подключён) и текущий врач в правом верхнем углу.
- Плитки 1 / 2 / 4 — сколько снимков показывать одновременно.
- Верхнее меню: Файл, Сеть, База данных, Настройки, Справка, Лицензия.

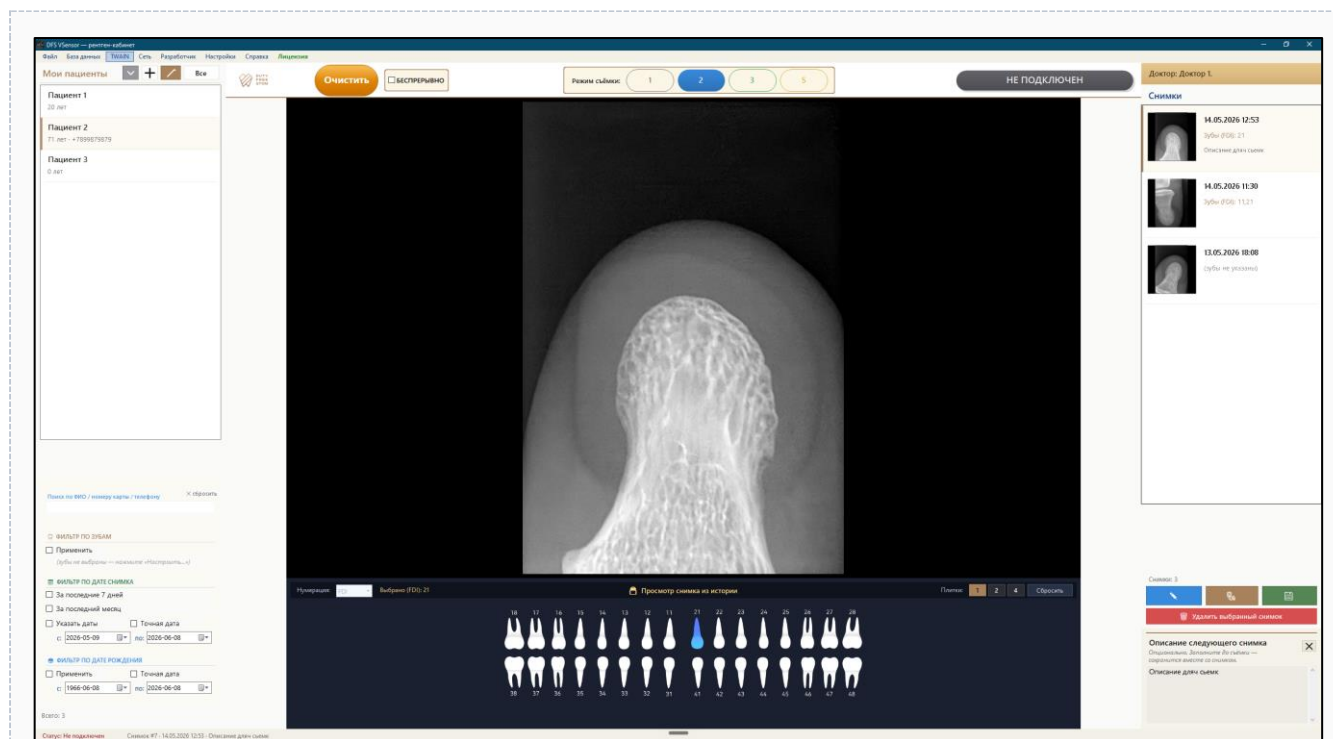


Рис. 3

Главное окно: список пациентов, снимки, режимы съёмки и зубная карта.

Верхнее меню — кратко

Файл: обновить данные, импорт/экспорт снимка, тип сенсора, сменить врача, выход.

Сеть: настройка сети и данные для подключения (тариф «Максимум»).

База данных: резервное копирование, импорт из другого ПО.

Настройки: калибровка сенсора, об организации.

Справка: об устройстве, о режимах съёмки, связаться с производителем, проверить обновления, о тарифах.

Лицензия: текущий тариф, срок, активация лицензии.

TWAIN: тип сенсора (выбрать тип сенсора, чем делать снимки)

3. Пациенты

3.1. Карточка пациента

Назначение: создание нового пациента или редактирование существующего.

Что можно делать:

- Заполнить ФИО, дату рождения/возраст, телефон и другие поля.
- Сохранить — пациент появится в списке на главном окне.

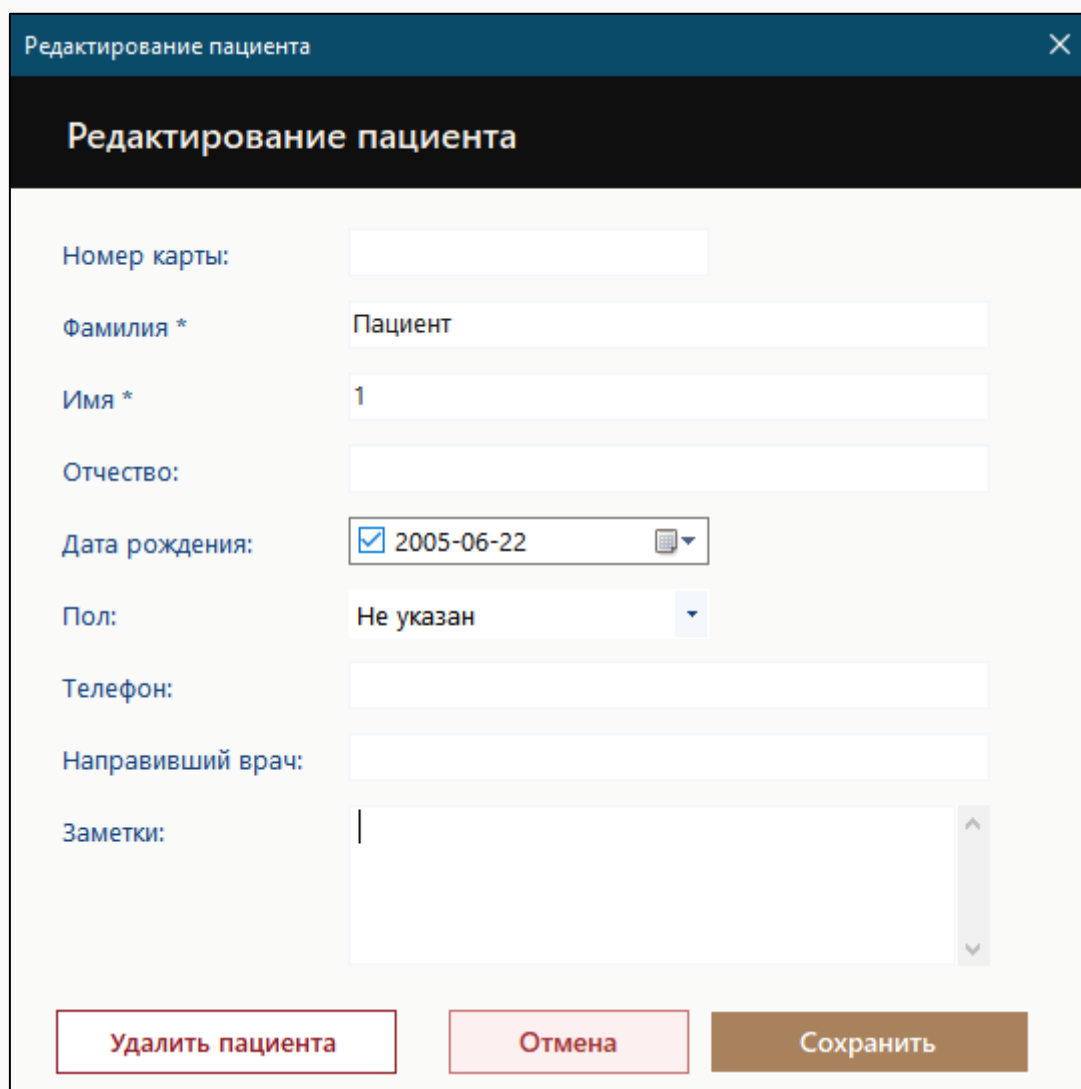


Рис. 4

Карточка пациента: поля ФИО, дата рождения, телефон. Редактирование пациента

3.2. Фильтр по зубам

Назначение: отобразить снимки пациента по конкретным зубам.

Что можно делать:

- Отметить нужные зубы на отдельной зубной карте (нотация FDI).
- Выбрать режим отбора: ИЛИ / И / КРОМЕ.
- Применить — список снимков отфильтруется.

Выбор зубов для фильтра

Режим фильтра: ☒ ИЛИ (любой из этих зубов) ☐ И (все эти зубы) ☐ ВСЕ КРОМЕ (ни одного из этих)

Выберите зубы, по которым нужно найти пациентов. Этот выбор НЕ связан с выбором зубов для следующего снимка — они независимы.

Нумерация: FDI Не выбрано Сбросить

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

38 37 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46 47 48

Сбросить Применить фильтр Отмена

Рис. 5

Окно фильтра по зубам со своей зубной картой.

4. Съёмка и сенсор

4.1. Выбор типа сенсора

Назначение: указать, с каким сенсором работает программа.

Что можно делать:

- Три варианта: визиограф Voldent, TWAIN-сенсор другого производителя, или эмулятор (для теста).
- Открывается из меню «Файл → Тип сенсора...».

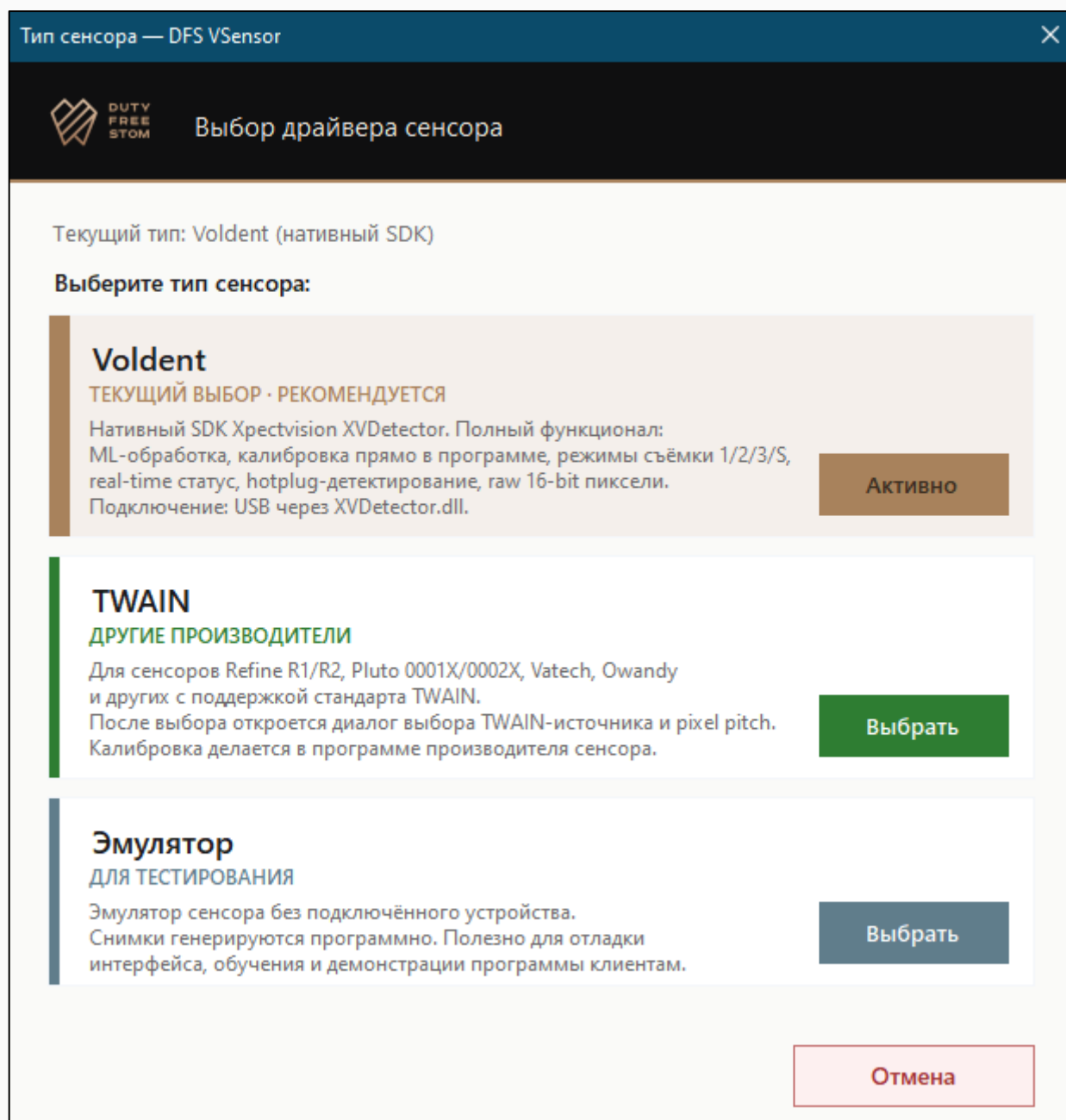


Рис. 6

Окно выбора типа сенсора (три карточки).

4.2. Выбор TWAIN-источника

Тариф «Максимум»

Назначение: выбрать конкретный TWAIN-сканер, если используется сенсор другого производителя.

Что можно делать:

- Выбрать источник из списка (например, Refine, Vatech).
- Программа запомнит выбор.

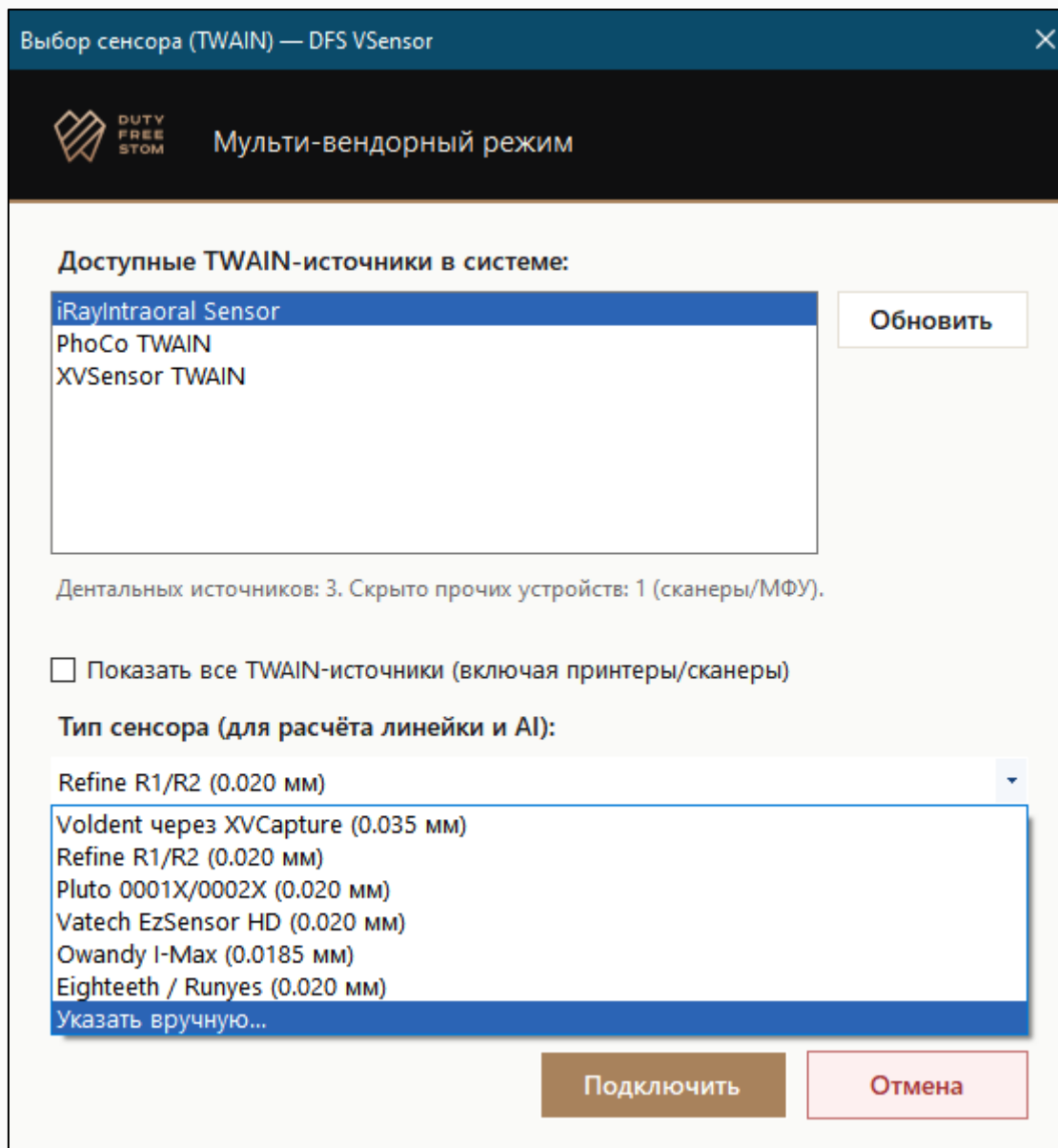


Рис. 7

Окно выбора TWAIN-источника.

4.3. Редактирование снимка

Назначение: редактировать описание и зубы для снимка.

Что можно делать:

- Посмотреть превью снимка из истории.

- Изменить выбранные зубы.
- Ввести заметку и сохранить (или отменить).

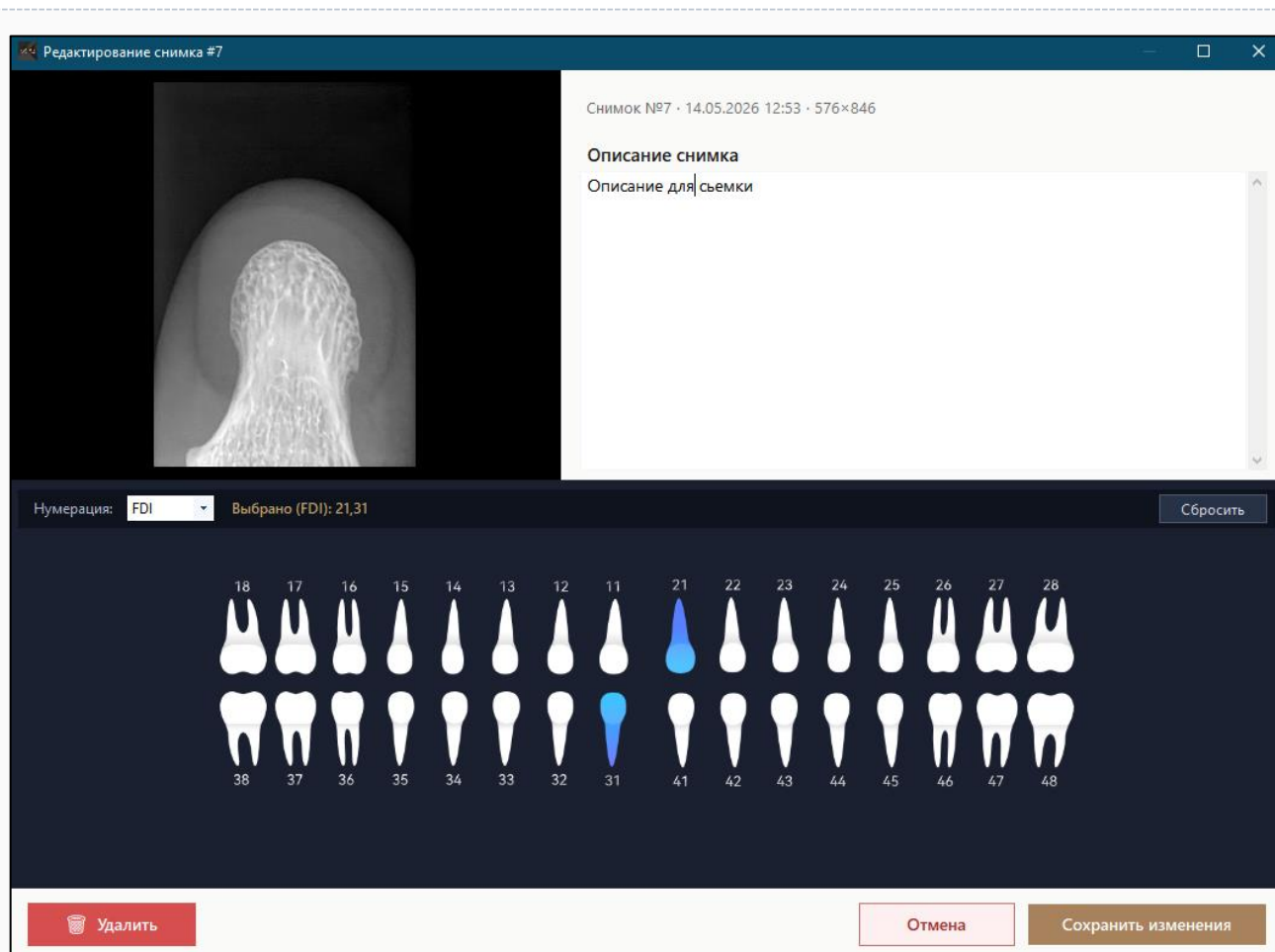


Рис. 8

Окно редактирования снимка: превью, зубы, поле заметки.

4.4. О режимах съёмки

Назначение: справка по четырём режимам обработки снимка (1 / 2 / 3 / S).

Что можно делать:

- Описание каждого режима: когда применять, плюсы и минусы.
- Подробности — в отдельном документе «Режимы съёмки».

Калибровка сенсора

Меню «Настройки → Калибровка сенсора...» — импорт калибровочного файла визиографа. Без калибровки снимки могут быть некорректными. При первой установке калибровка и драйверы загружаются автоматически с нашей флешки.


5. Работа со снимками: диагностика и отчёты

5.1. Окно диагностики снимка

Назначение: подробный просмотр и разбор снимка.

Что можно делать:

- Безопасная обработка: оригинал снимка никогда не изменяется.
- Инструменты измерения: линейка, углы, повороты.
- Разметка снимка (аннотации) и её удаление.
- Плитки 1 / 2 / 4 — сравнить несколько снимков рядом.
- Сброс снимка до оригинала.
- Запуск ИИ-анализа и открытие конструктора PDF-отчёта.

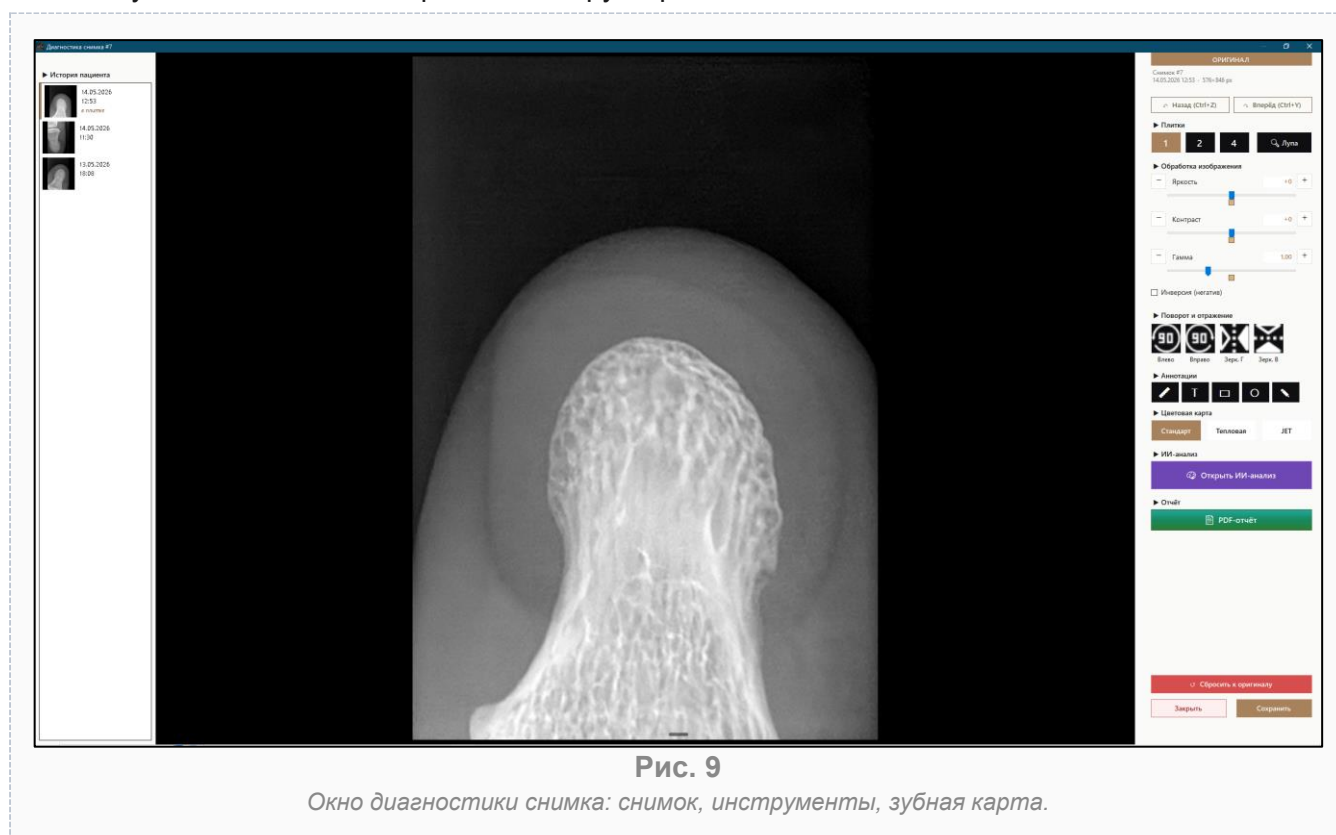

5.2. ИИ-диагностика

Тариф «Расширенная» и выше · нужен интернет

Назначение: автоматический анализ снимка искусственным интеллектом.

Что можно делать:

- Запуск ИИ-анализа снимка (определение тканей).
- Индикатор прогресса с возможностью отмены.
- Результат показывается поверх снимка.

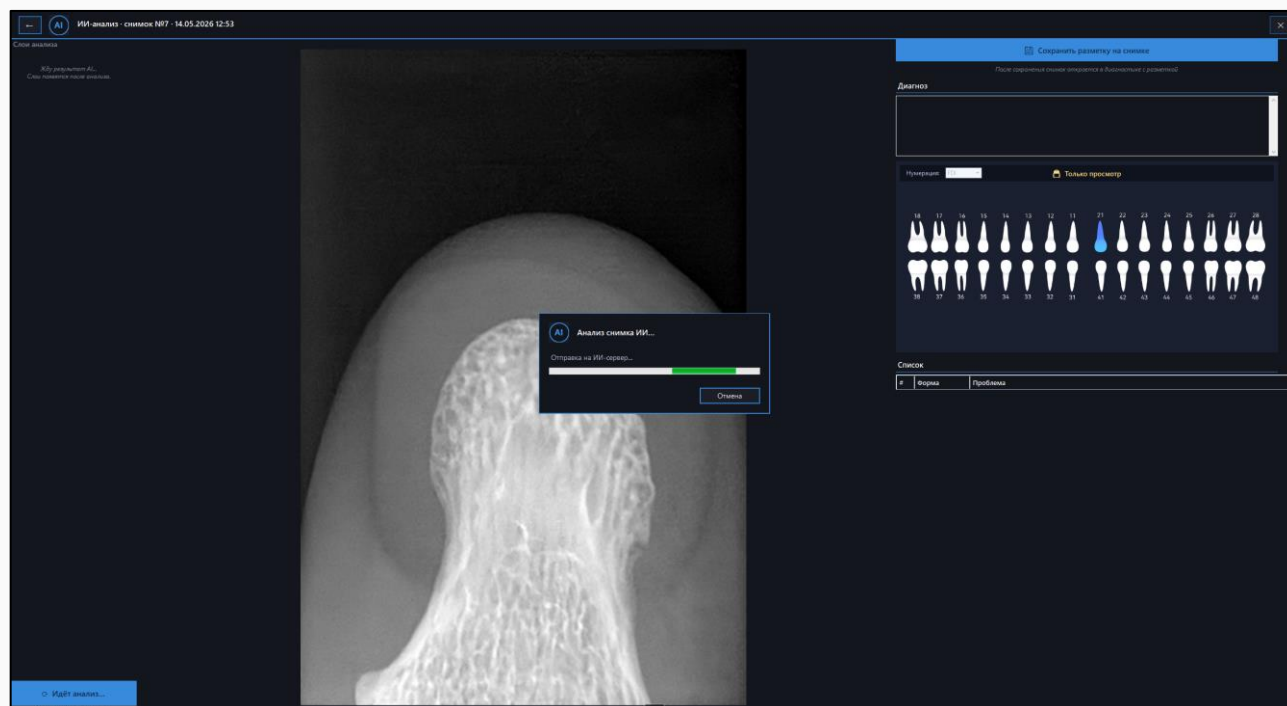


Рис. 10

Окно ИИ-диагностики с результатом анализа.

5.3. Конструктор PDF-отчёта

Тариф «Расширенная» и выше

Назначение: собрать и распечатать отчёт по снимку.

Что можно делать:

- Выбрать, что включить в отчёт (снимок, описание, данные пациента и организации).
- Сформировать PDF для печати или сохранения.

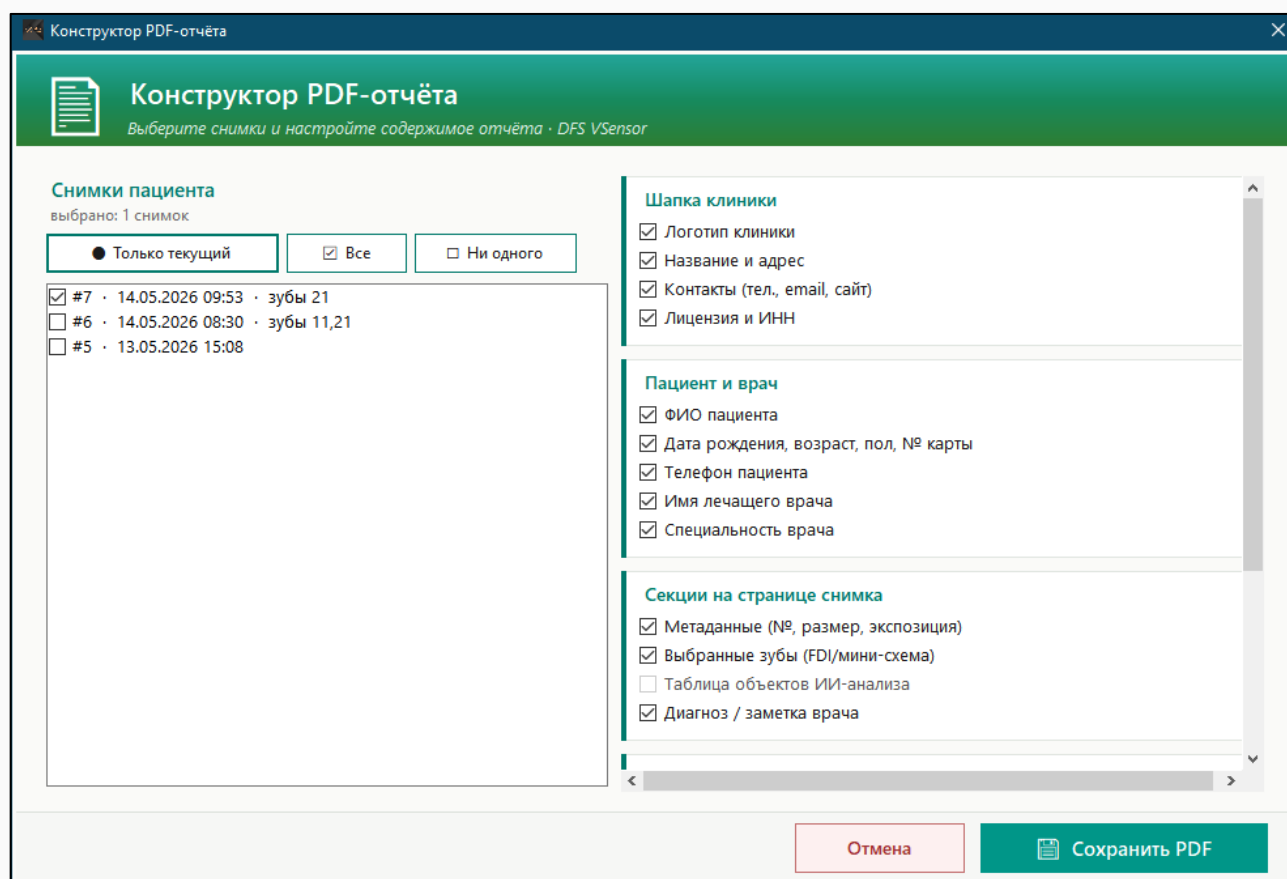


Рис. 11

Окно «Конструктор PDF-отчёта».

5.4. Выбор снимка из истории

Назначение: выбрать снимок для сравнения в плитках диагностики.

Что можно делать:

- Миниатюры снимков пациента с данными (дата, зубы, заметка).
- Выбрать нужный снимок для второй/третьей плитки.



Рис. 12

Окно выбора снимка из истории.

5.5. Импорт снимка

Тариф «Расширенная» и выше

Назначение: добавить готовый файл-снимок в карту пациента.

Что можно делать:

- Поддержка форматов PNG, JPG, TIFF, BMP.
- Снимок привязывается к выбранному пациенту.

Импорт снимка для: Пациент 2

Импорт внешнего файла-снимка в карту пациента

Файл снимка: C:\DFS_Storage\Patients\2\4f5596b7260f4d38afabd94259daf3fb.png

Обзор...



Файл: 4f5596b7260f4d38afabd94259daf3fb.png
Размер: 550 КБ
Разрешение: 576 × 846 px
Формат: PNG

Будет сохранён в карту пациента
«Пациент 2».

Дата съёмки: 2026-05-31 12:00:00

Зубы (опционально, нажмите по зубу для выбора)

Нумерация: FDI

Выбрано (FDI): 11,21,31

Сбросить

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
38	37	36	35	34	33	32	31	41	42	43	44	45	46	47	48

Описание: Новый импортированный снимок от доктора 5.

Импортировать

Отмена

Рис. 13

Окно импорта снимка.

5.6. Экспорт снимка

Тариф «Расширенная» и выше

Назначение: сохранить снимок в файл на компьютере.

Что можно делать:

- Сохранение обработанного или исходного снимка.
- Открывается из меню «Файл → Экспортировать снимок...» или справа снизу зеленая кнопка с правого края без надписи (работают только при выбранном снимке).

 Экспорт снимка #7 

Экспорт снимка №7 от 14.05.2026 12:53

Формат:

PNG 


Шаблон имени:

Дата + ФИО 

Имя файла:

2026-05-14 - Пациент 2

Папка:

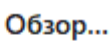C:\Users\1\Desktop 

☒ Открыть папку после экспорта

Будет сохранено как: C:\Users\1\Desktop\2026-05-14 - Пациент 2.png

 **Экспорт**

Отмена

Рис. 14

Окно экспорта снимка.

6. Данные и организация

6.1. Об организации

Тариф «Расширенная» и выше

Назначение: данные клиники для шапки снимков и отчётов.

Что можно делать:

- Название, адрес, контакты клиники.
- Используются при печати снимков и в PDF-отчётах.

Рис. 15

Окно «Об организации».

6.2. Резервное копирование

Тариф «Расширенная» и выше

Назначение: создать копию базы данных и восстановить её при необходимости.

Что можно делать:

- «Создать резервную копию...» — сохранить «.dump» базы.
- «Восстановить из резервной копии...» — заменить текущую базу из копии.

- Делается на ПК-сервере. Папку снимков копируйте отдельно.

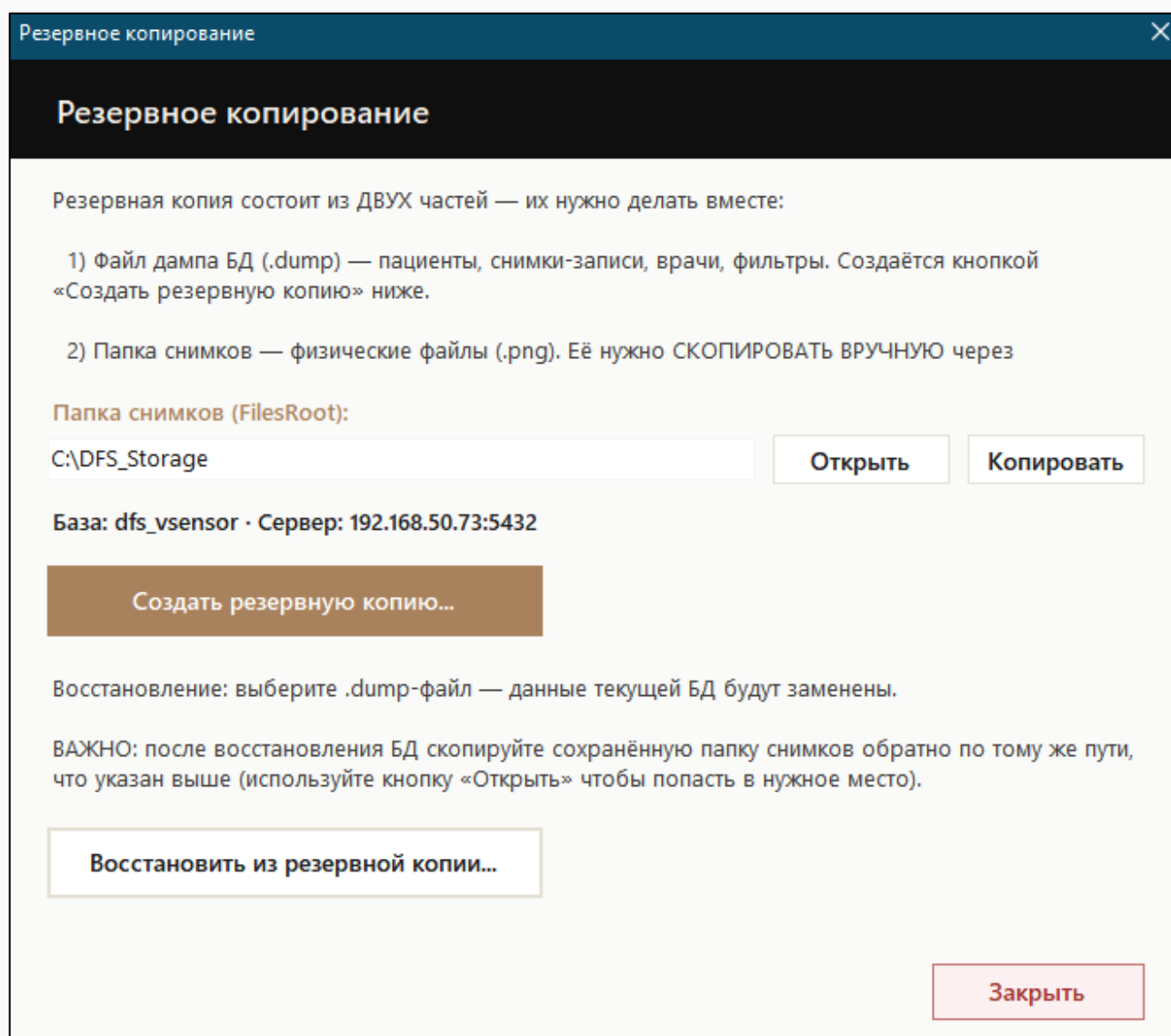


Рис. 16

Окно «Резервное копирование».

6.3. Импорт из другого ПО

Тариф «Расширенная» и выше

Назначение: перенести пациентов и снимки из другой программы.

Что можно делать:

- Поддержка VDSensor, Refine / Dental Sensor.
- Перенос карт пациентов и их снимков в DFS VSensor.

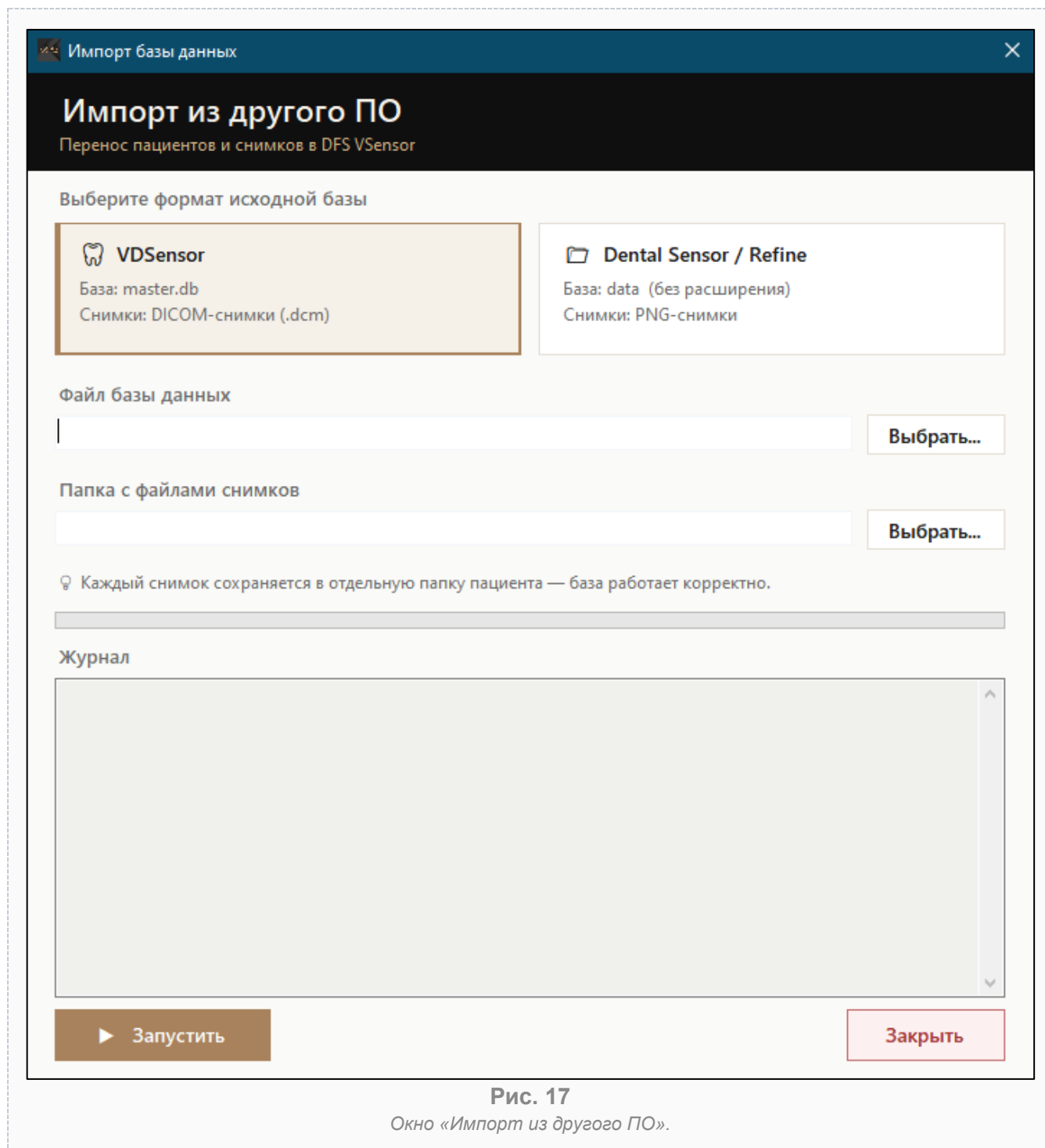


Рис. 17

Окно «Импорт из другого ПО».

7. Работа по локальной сети

Тариф «Максимум»

Эти окна нужны, чтобы связать несколько компьютеров клиники в одну сеть с общей базой. Подробная пошаговая настройка — в отдельном документе «Настройка работы по локальной сети».

7.1. Настройка сети

Назначение: управление доступом к базе и папке снимков для других ПК.

Что можно делать:

- «Открыть базу для сети» — разрешить подключение клиентов.
- «Расшарить папку снимков» — сделать снимки доступными по сети.
- «Сменить сервер...» — подключить этот ПК к другому серверу.

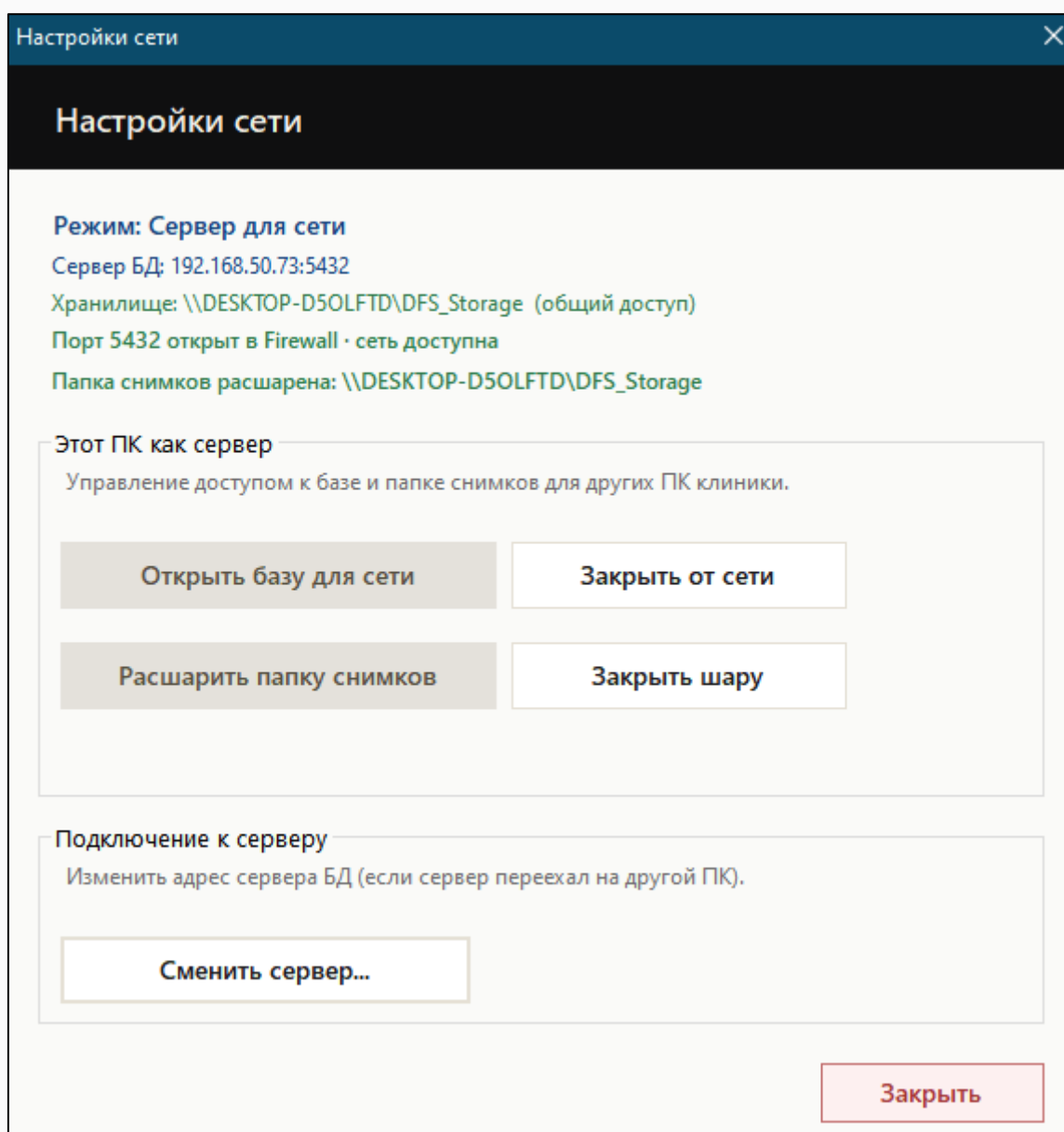



Рис. 18
Окно «Настройка сети».

7.2. Информация для подключения

Назначение: данные, которые вводят на других ПК для подключения к этой базе.

Что можно делать:

- Адрес, порт, логин и пароль — с кнопками «Копировать».
- Эти данные вводятся в окне «Сменить сервер» на клиентском ПК.

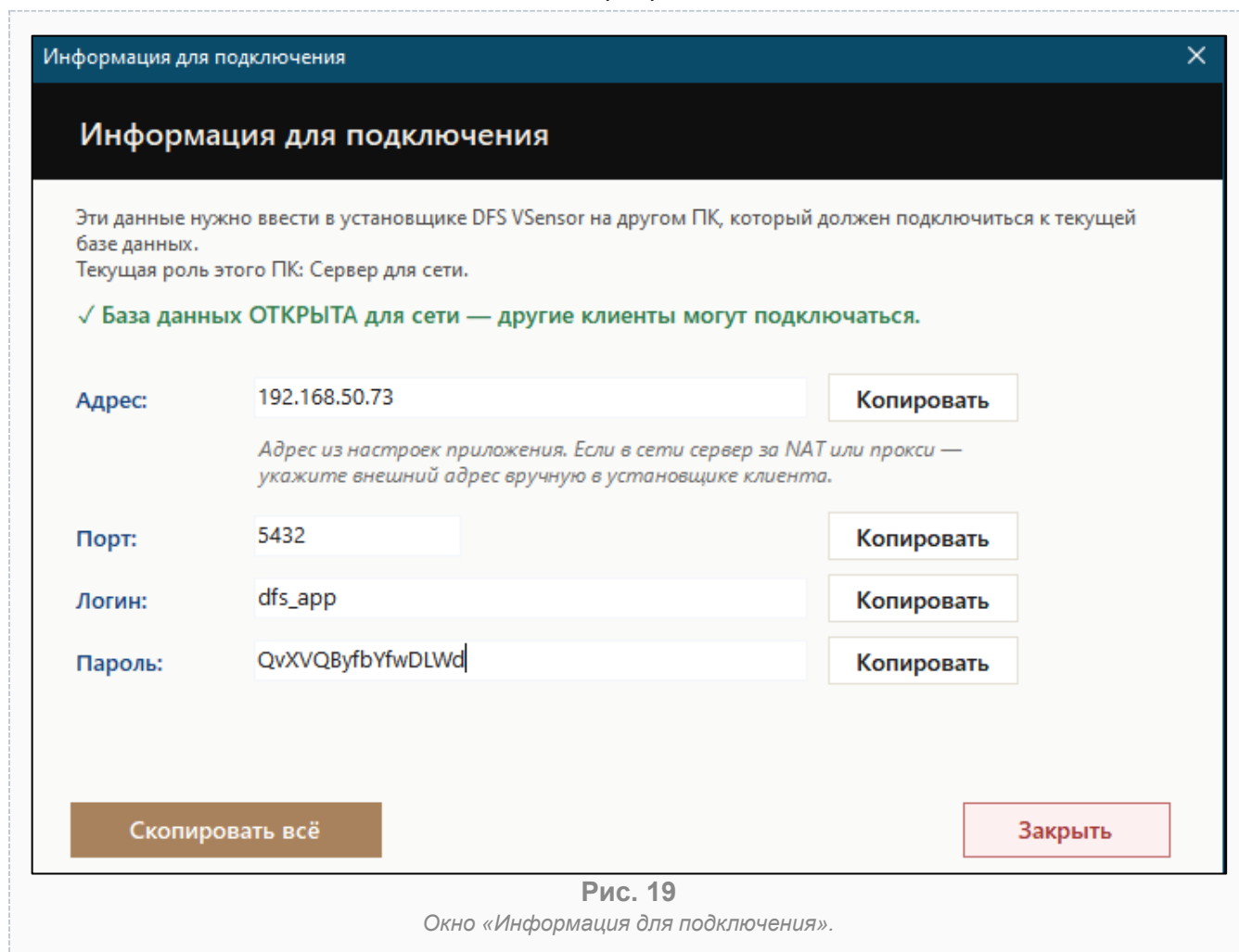

7.3. Смена сервера

Назначение: подключить этот компьютер к серверной базе другого ПК.

Что можно делать:

- Ввести адрес, порт, логин, пароль и путь к папке снимков.
- «Проверить подключение», затем «Сохранить» — программа перезапустится.

Сменить сервер

×

Смена сервера

Введите данные для подключения к другому ПК-серверу. После сохранения этот ПК станет клиентом указанной БД. Данные текущей БД на ПК НЕ удаляются — но через эту программу к ним больше не будет доступа, пока не вернёте старый адрес.

Адрес:

192.168.50.73

Порт:

5432

Логин:

dfs_app

Пароль:

●●●●●●●●●●●●●●●●

Папка снимков:

C:\DFS_Storage

Обзор...

Проверить подключение

Не проверено

Отмена

Сохранить

Рис. 20

Окно «Сменить сервер».

8. Справка, обновления и лицензия

8.1. Связаться с производителем

Назначение: быстрый контакт с DutyFreeStom.

Что можно делать:

- Кнопки перехода в Telegram, WhatsApp, MAX и e-mail.
- QR-коды для быстрого перехода с телефона.

8.2. Горячие клавиши

Назначение: список полезных сочетаний клавиш.

Что можно делать:

- Сочетания сгруппированы по окнам программы.
- Подробности — в отдельном документе «Горячие клавиши».

8.3. О тарифах лицензии

Назначение: сравнение трёх тарифов и их возможностей.

Что можно делать:

- Простая (0 ₽), Расширенная (3 000 ₽), Максимум (5 000 ₽).
- Что входит в каждый тариф.

8.4. Лицензия (меню) и активация

Назначение: посмотреть текущий тариф и активировать лицензию.

Что можно делать:

- Меню «Лицензия»: текущий тариф, срок, «Активировать лицензию...».
- Активация: скопировать ID компьютера → прислать нам → вставить полученный ключ.
- Подробности — в документе «Установка и активация лицензии».

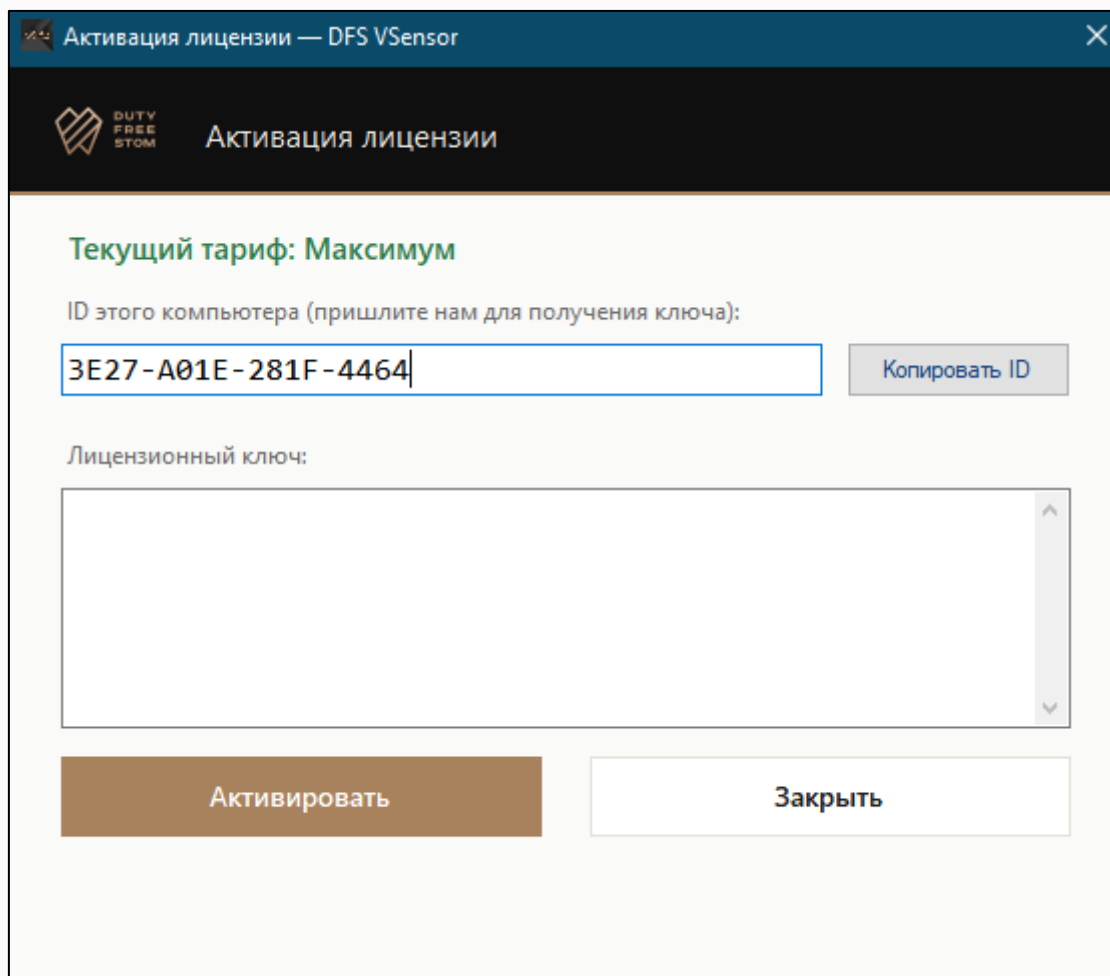


Рис. 21

Окно активации лицензии.

8.5. Об устройстве / О программе

Назначение: информация о подключённом сенсоре и о версии программы.

Что можно делать:


- «Об устройстве» — сведения о визиографе.
- «О программе» — версия и сведения о DFS VSensor.

8.6. Проверка обновлений

Назначение: проверить и установить свежую версию программы.

Что можно делать:

- Меню «Справка → Проверить наличие обновлений...».
- Программа сама скачает и установит обновление, затем перезапустится.

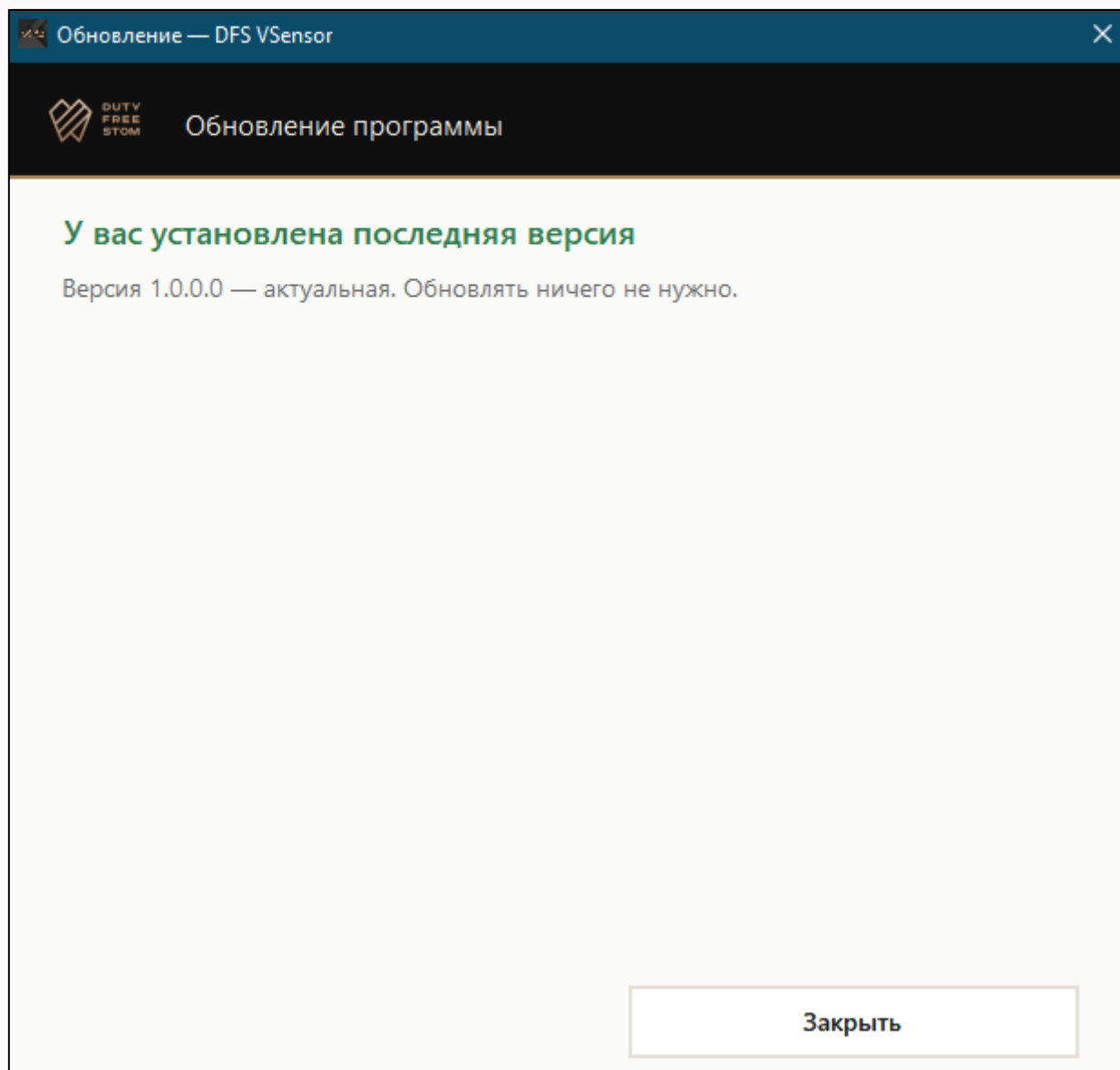**Рис. 22**

Окно проверки обновлений.

Подробности по использованию будут предоставлены документом и видео чуть позже, пока по всем вопросам обращаться к нам в техническую поддержку, со всем поможем быстро и качественно.

Вопросы по работе программы? Пишите в Telegram, WhatsApp, MAX: +7 905 549 99 55 · dutyfreestom.ru