


DFS VSensor

Установка приложения и активация лицензии

Локальная установка на один компьютер. Пошаговое руководство для клиники.

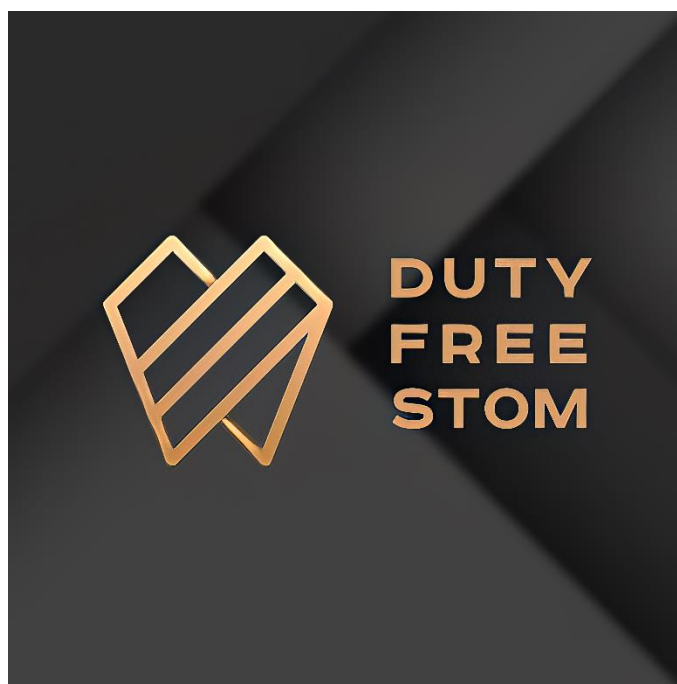

DutyFreeStom · dutyfreestom.ru · +7 905 549 99 55

Содержание

Содержание	2
1. Перед установкой	3
Что понадобится.....	3
2. Установка программы.....	3
3. Первая настройка (локальный режим)	4
4. Активация лицензии	9
5. Возможные проблемы	10
6. Связаться с нами	11

1. Перед установкой

Это руководство описывает установку DFS VSensor на один компьютер (локальный режим) и активацию лицензии. Если нужно связать несколько компьютеров в сеть — смотрите отдельную инструкцию «Настройка работы по локальной сети».

Важно: лицензия не вшита в программу

Программа поставляется БЕЗ встроенной лицензии. Сразу после установки она работает в бесплатном тарифе «Простая».

Платные функции (ИИ-диагностика, PDF-отчёты, работа по сети, TWAIN-сенсоры и др.) открываются активацией лицензии — см. раздел 4.

Что понадобится

- Компьютер с **Windows 10 или 11 (64-бит)**.
- **Права администратора** (установщик запросит подтверждение UAC).
- **Подключение к интернету** — обязательно при первом запуске: программа загрузит актуальную версию, а также понадобится для активации лицензии.
- Дистрибутив: файл установщика **DFS-VSensor-Setup-1.0.0.exe** (мы предоставляем), у него иконка открытой коробки и диск рядом.
- Визиограф (сенсор) можно подключить сразу или позже — программа определит его автоматически.

2. Установка программы

Шаг 1. Запустите установщик

Запустите файл `DFS-VSensor-Setup-1.0.0.exe`. Windows попросит подтвердить права администратора — нажмите «Да». Если не попросит, то рекомендуется самому запустить с правами администратора, для этого наведите курсор на установщика, нажмите правой кнопкой мыши и нажать «Запуск от имени администратора». Иначе после успешной установки, если Вы оставите включенной галочку «Запустить приложение», то Вам выдаст ошибку, что **недостаточно прав**. И придется запускать приложение вручную по созданному ярлыку.

Шаг 2. Пройдите шаги установщика

- Папка установки — оставьте по умолчанию (`Program Files\DFS VSensor`), можете при необходимости выбрать свое местоположение, но рекомендуется оставить по умолчанию.
- Поставьте галочку «Создать ярлык на рабочем столе» (удобно).
- Нажмите «Установить». Установщик сам поставит нужные компоненты Visual C++.

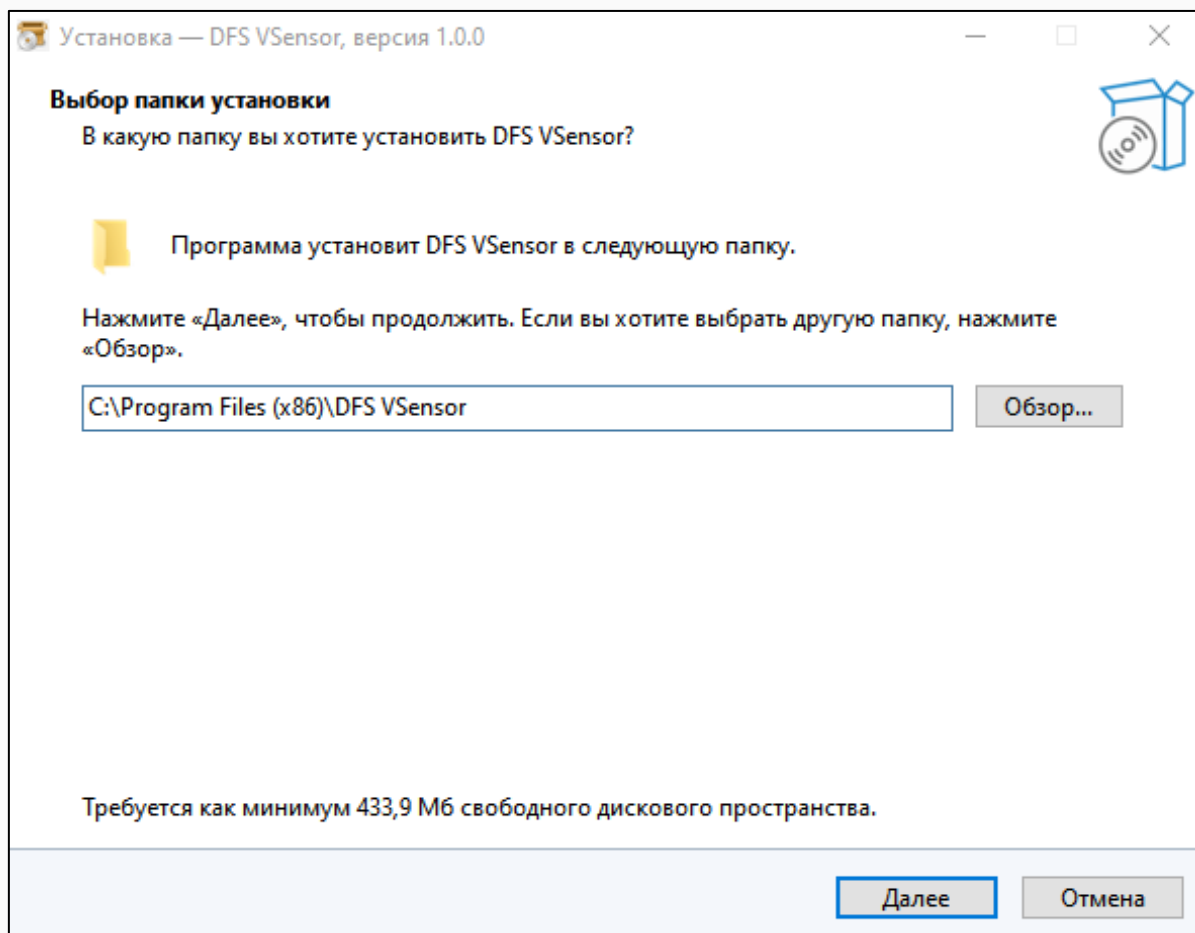


Рис. 1

Окно установщика: выбор папки и ярлыка.

Шаг 3. Завершите установку


По окончании оставьте галочку «Запустить DFS VSensor» (или запустите программу с ярлыка на рабочем столе).

3. Первая настройка (локальный режим)

При первом запуске откроется мастер первой установки. Программа запускается с правами администратора — подтвердите UAC, если появится запрос.

Шаг 1. Выберите режим «Локально (один ПК)»

На первом шаге мастера режим «Локально (один ПК)» уже выбран. Это значит: база данных и приложение будут на этом же компьютере. Нажмите «Далее →».

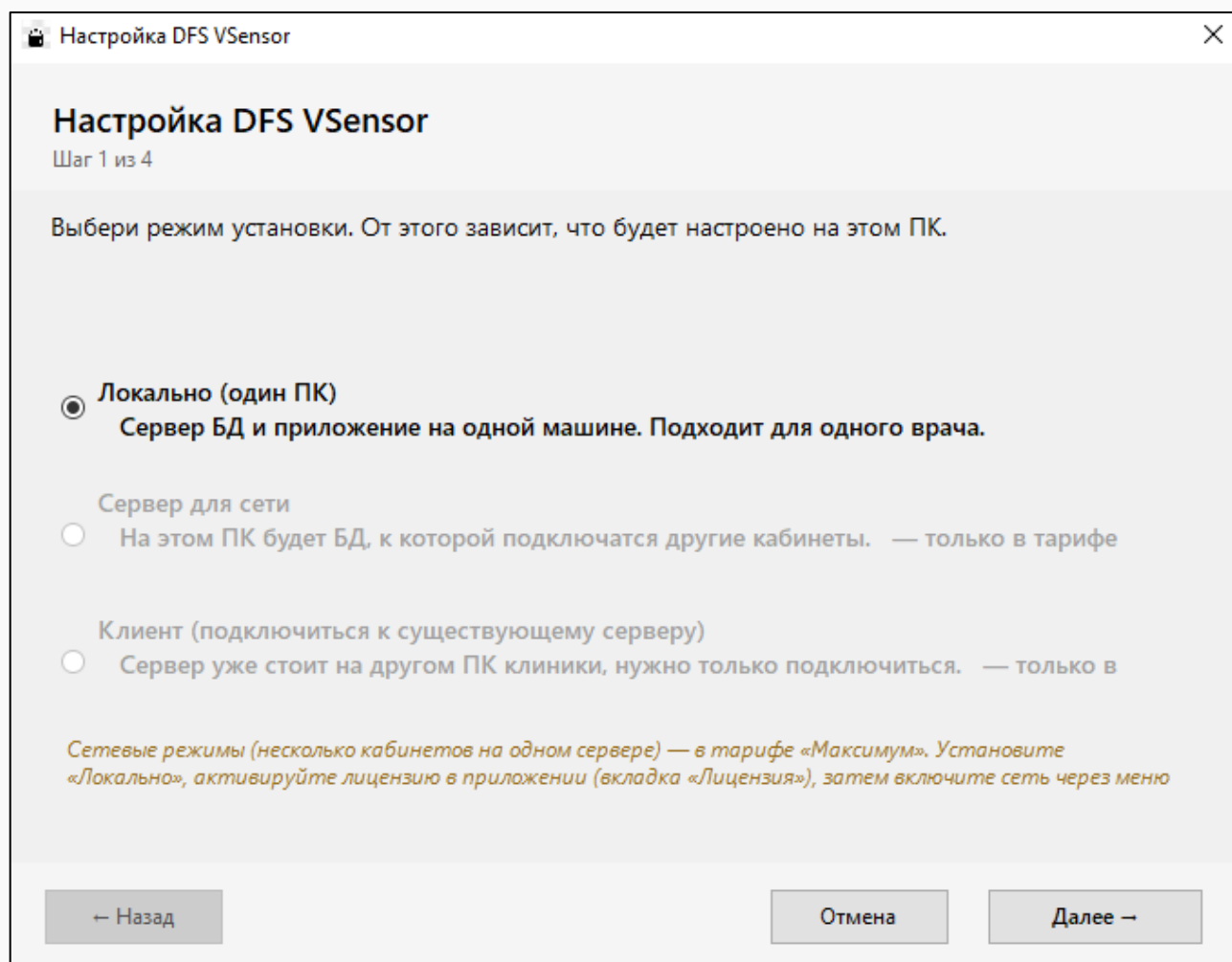**Рис. 2**

Мастер, шаг 1 — выбран режим «Локально (один ПК)».

Шаг 2. Установите базу данных

Нажмите **«Установить PostgreSQL»**. Мастер сам распакует и настроит базу данных, зарегистрирует службу Windows (потребуется UAC — «Да»). Дождитесь зелёной строки **«УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА»**.

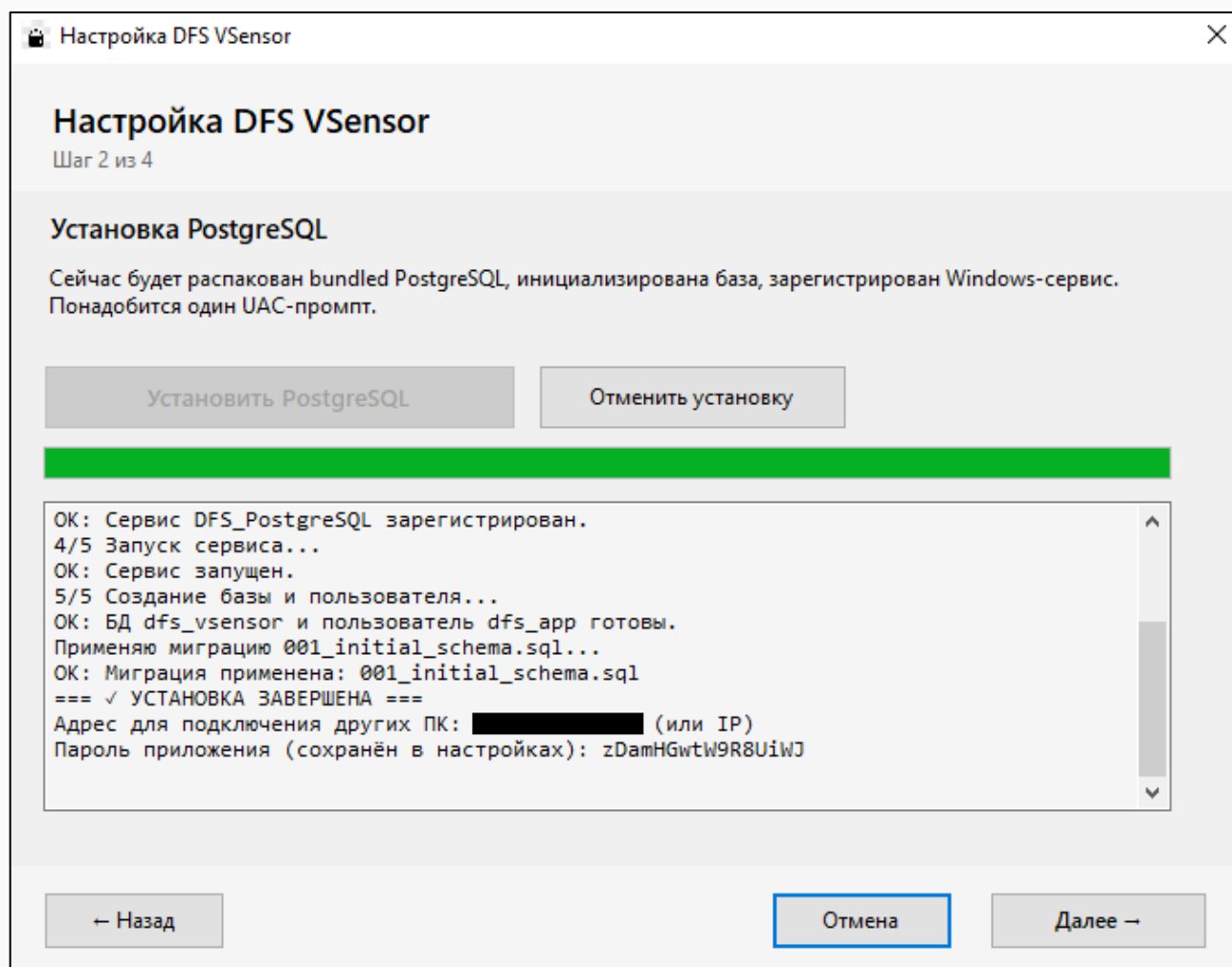


Рис. 3

Успешная установка и надпись «УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА».

Шаг 3. Папка для снимков и завершение

На шаге с папкой снимков оставьте путь по умолчанию (например, `C:\DFS_Storage`). Нажмите «Далее →», затем «Готово». При необходимости, можете поменять путь, но рекомендуется оставить по умолчанию.

Дождитесь завершения загрузки, и запустите приложение (если установщик был запущен не с правами доступа, то вручную, если выдаст ошибку с правами доступа, тогда запустить надо, как было сказано в шаге 1 второго раздела).

Шаг 4. Загрузка актуальной версии

При первом запуске программа проверит обновления и загрузит актуальную версию (нужен интернет,). Дождитесь окончания — программа перезапустится сама.

Нет интернета при первом запуске?

Программа не пустит дальше, пока не обновится до актуальной версии (так задумано — клиент всегда стартует на свежей версии). Подключите интернет и нажмите «Повторить».

Шаг 5. (Опционально) Загрузка калибровки

На этом шаге Вам предложат выполнить автозагрузку калибровки и драйверов. Очень **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** выполнить ее, для этого надо вставить одновременно и флешку из комплекта, и визиограф, после чего нажать на кнопку «Загрузить» (кнопка «Не готово» перекрасится в зеленый и будет доступна для нажатия).

Данная автозагрузка избавит Вас от ненужной дополнительной настройки: загрузку калибровочного файла с флешки вручную через программу, установка драйверов на визиограф через диспетчера устройств.

По желанию, можно пропустить, но придется вышеописанные действия делать вручную.

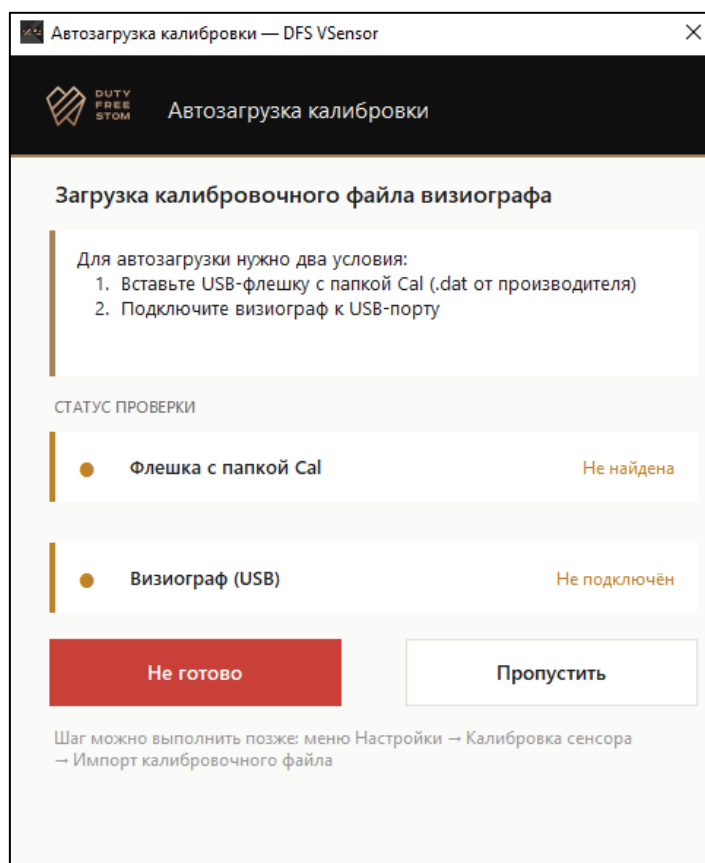


Рис. 4 – «Автозагрузка калибровки и драйверов»

Шаг 6. Зарегистрируйте врача

В окне входа нажмите «**Регистрация**». Введите ФИО, логин и пароль — это будет учётная запись администратора клиники. Войдите под ней.

DFS VSensor — вход

DUTY FREE STOM Вход в систему

Регистрация врача

Регистрация врача
DFS VSensor · DutyFreeStom

Фамилия *

Имя *

Отчество

Специальность

Пароль необязателен — можно оставить пустым (вход без проверки)

Пароль

Подтверждение

Отмена Создать врача

+ Добавить врача Выйти

DFS VSensor v1.0.0 · DutyFreeStom.ru

Рис. 5

Форма регистрации врача — ФИО / логин / пароль.

Программа готова к работе

После входа можно делать снимки и вести пациентов в бесплатном тарифе «Простая». Чтобы открыть платные функции — активируйте лицензию (раздел 4).

4. Активация лицензии

По умолчанию программа работает в тарифе «Простая» (бесплатный). Чтобы открыть платные функции, активируйте нужный тариф — это делается один раз на каждом компьютере.

Шаг 1. Откройте окно активации

В верхнем меню программы выберите **«Лицензия → Активировать лицензию...»**.

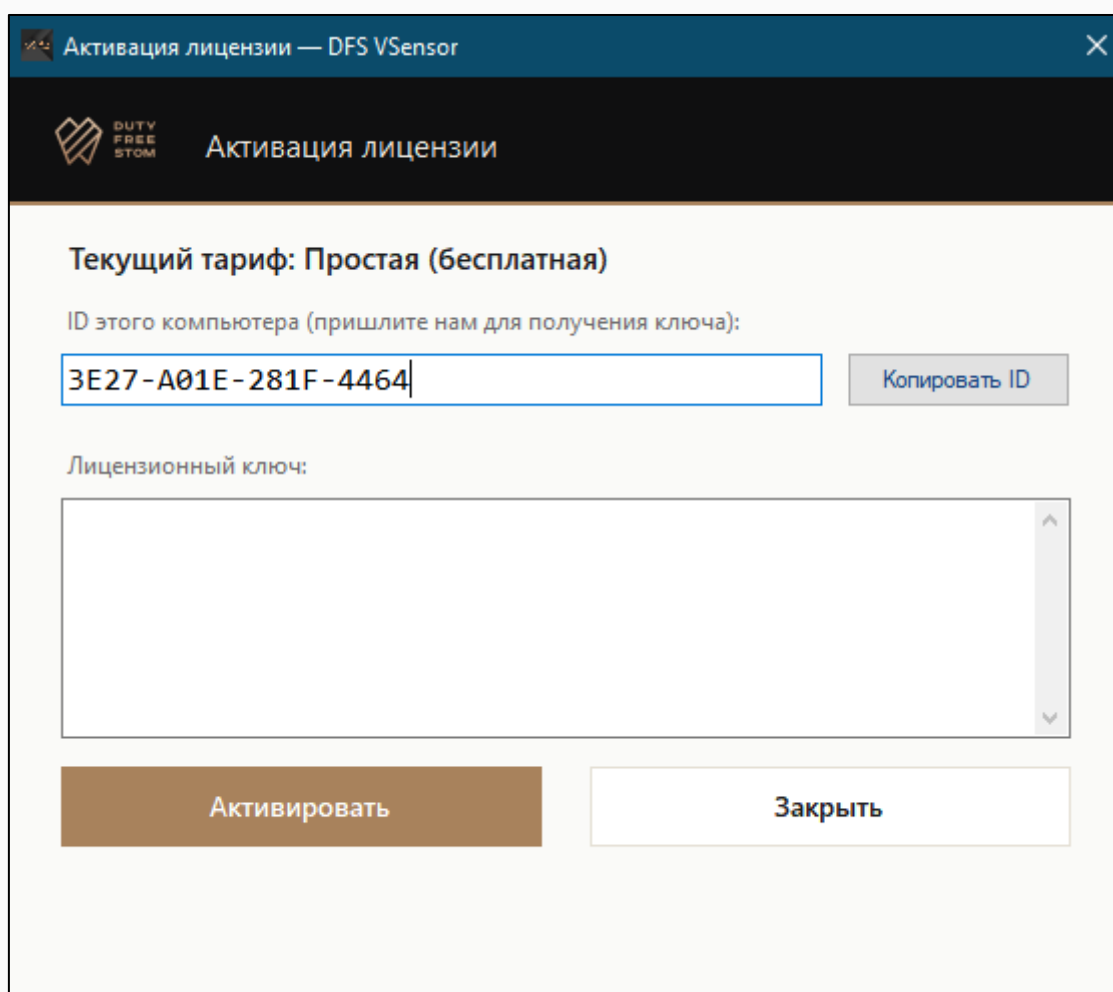


Рис. 6

Меню «Лицензия → Активировать лицензию...».

Шаг 2. Скопируйте ID этого компьютера


В окне активации есть поле «ID этого компьютера». Нажмите кнопку **«Копировать ID»**.

Шаг 3. Пришлите ID нам и укажите тариф

Отправьте скопированный ID нам (контакты в конце) и укажите нужный тариф — **«Расширенная»** или **«Максимум»**. Мы сгенерируем лицензионный ключ именно под ваш ID. Каждая лицензия привязывается только к **ОДНОМУ** устройству по уникальному ID компьютера! Поэтому перенести лицензию **НЕ получится** и потребуются купить новую для другого устройства. **Будьте внимательны!**

Шаг 4. Вставьте ключ и активируйте

Вставьте полученный ключ в поле «**Лицензионный ключ**» и нажмите «**Активировать**». Программа подтвердит тариф и перезапустится — платные функции появятся в меню.

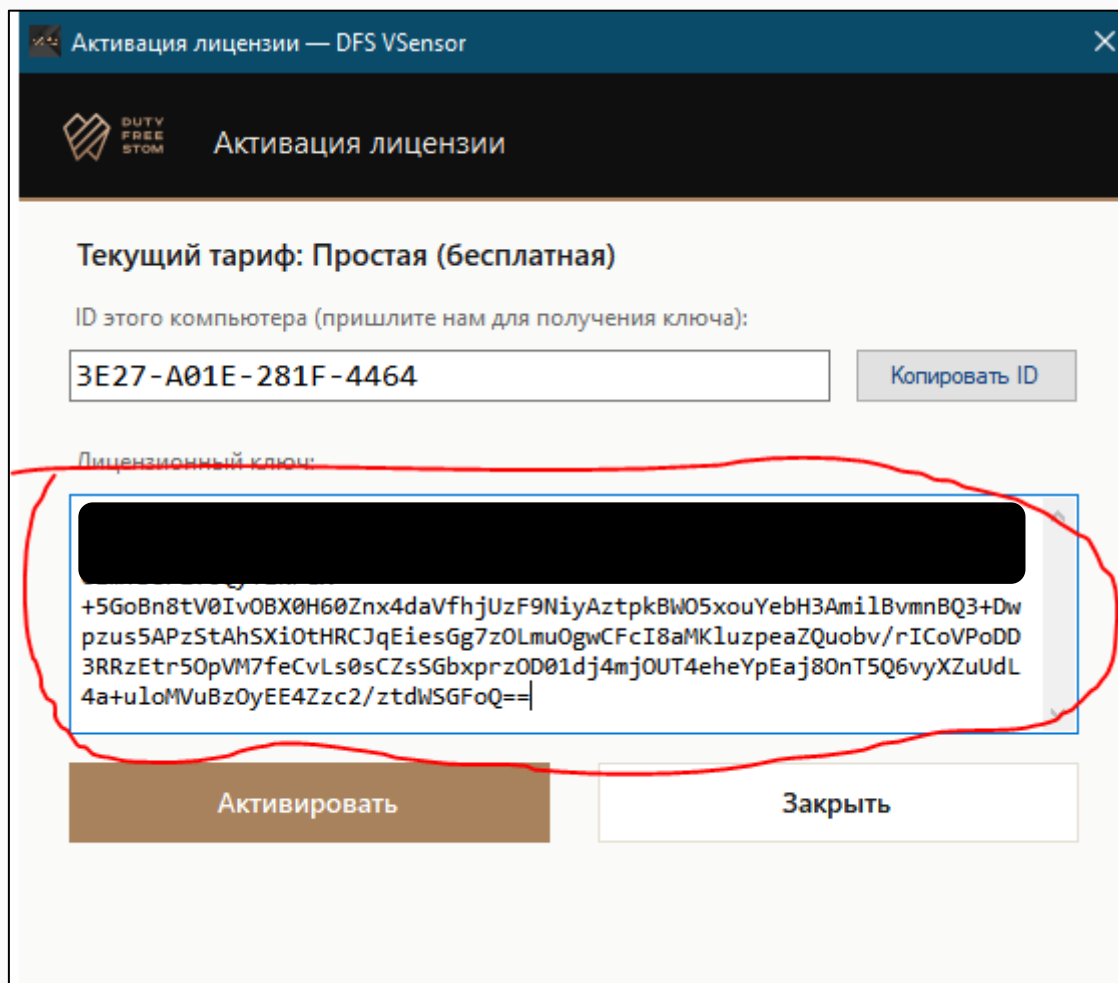**Рис. 7**

Окно активации: вставленный ключ и кнопка «Активировать».

Полезно знать

Лицензия привязана к одному компьютеру (по его ID). Для другого ПК нужен отдельный ключ под его ID.

Текущий тариф всегда виден в меню «Лицензия → Текущий тариф».

Окно активации также открывается скрытым сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Alt+L.

5. Возможные проблемы

«Лицензия для другого ПК»	Ключ сгенерирован под другой ID. Пришлите нам ID именно того компьютера, на котором активируете.
«Истёк срок лицензии»	Лицензия с ограниченным сроком закончилась. Свяжитесь с нами для продления.
Не пускает дальше при первом запуске	Нет интернета — обязательна загрузка актуальной версии. Подключите интернет и нажмите «Повторить».
Не запускается база данных / нет прав	Запустите программу от имени администратора (правый клик по ярлыку → «Запуск от имени администратора»).

6. Связаться с нами

Поможем с установкой, активацией и любыми вопросами.

Телефон	+7 905 549 99 55
Telegram	t.me/+79055499955
WhatsApp	wa.me/79055499955
E-mail	dutyfreestom@gmail.com
Сайт	dutyfreestom.ru
Режим работы	Понедельник – Пятница, 10:00 — 19:00 (МСК)

Спасибо, что выбрали DFS VSensor!